

A Variety of
Delivery Options



Edwards Protection Cannulae

Antegrade Aortic Root Cannulae


ルートカニューレ



Edwards

Antegrade Aortic Root Cannulae



- 特徴**
- エドワーズルートカニューレは、大動脈基部から心筋保護液を効果的に注入することができます。
 - AR及びARCタイプにはニードルのキャップ部分にベントプラグが内蔵されており、血液の漏れを防ぎます。また、ARタイプにはニードルにスライドプラグが付いており、ニードル抜去時の血液の漏れを最小限に抑えます。
 - チップには、サイドホールが付いており適切な流量を確保します。
 - スタンダードタイプ、ベント付きタイプ、圧モニタリング付きタイプ、ベント・圧モニタリング付きタイプの4種類からお選び頂けます。
 - DurafloIIコーティング品も取り揃えております。

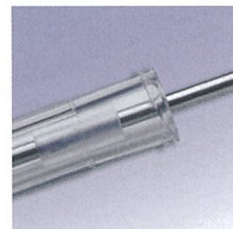

スライドプラグ

品番	本体サイズ	ニードルサイズ	備考
AR012	12ga./9Fr.	14ga.	スタンダードタイプ
AR012S ※	12ga./9Fr.	14ga.	スタンダードタイプ(スーチャーリング付)
AR012V	12ga./9Fr.	14ga.	ベント付きVタイプ
AR014	14ga./7Fr.	16ga.	スタンダードタイプ
AR014S	14ga./7Fr.	16ga.	スタンダードタイプ(スーチャーリング付)
AR014V	14ga./7Fr.	16ga.	ベント付きVタイプ
ARC011M	11ga./9Fr.	16ga.	圧モニタリング付きMタイプ
ATC011MV	11ga./9Fr.	16ga.	圧モニタリング・ベント付きMVタイプ
DIARC014	14ga./7Fr.	16ga.	スタンダードタイプ DurafloIIコーティング
DIIATC011V	11ga./9Fr.	13ga.	ベント付きVタイプ DurafloIIコーティング
DIIATC014V	14ga./7Fr.	16ga.	ベント付きVタイプ DurafloIIコーティング

※受注発注品

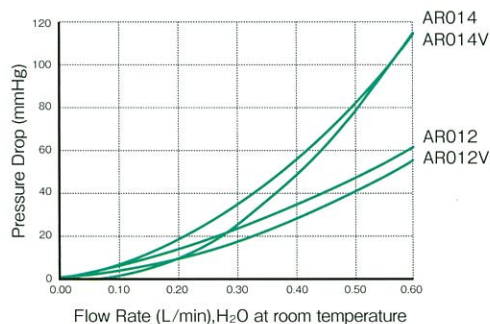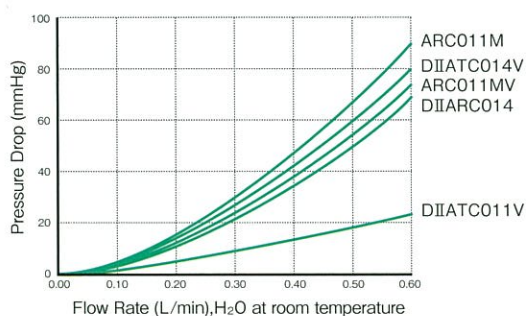

販売名	承認番号
エドワーズ体外循環カニューレNC	21500BZY00158
エドワーズ体外循環カニューレ	21300BZY00687
エドワーズ心筋保護用ルートカニューレ	21800BZY10177

本製品の使用は1回限りです。再使用・再滅菌はしないでください。

※記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

© 2009 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. EW2013071 1309_2_2000

製品に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

札幌 Tel.(011)261-6810(代) 仙台 Tel.(022)225-4743(代) 東京 Tel.(03)6859-0920(代)
 横浜 Tel.(045)232-7328(代) 名古屋 Tel.(052)735-7610(代) 大阪 Tel.(06)6350-6341(代)
 広島 Tel.(082)242-2425(代) 岡山 Tel.(086)226-2440(代) 福岡 Tel.(092)281-5414(代)

製造販売元 エドワーズライフサイエンス株式会社

本社：東京都新宿区西新宿6丁目10番1号

edwards.com/jp



Edwards