


Ultra Thin Wall Technology
Enhances Flow and Flexibility

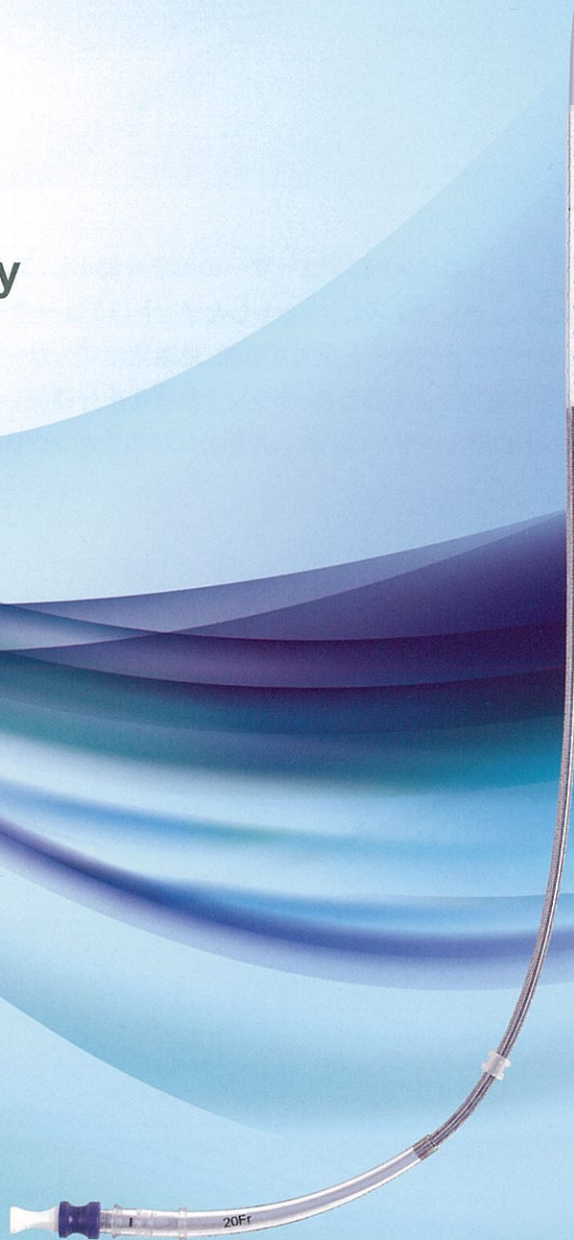

Edwards Protection Cannulae

VFEM

フェモラル 静脈脱血カニューレ



Edwards

特徴


- カニユーレとイントロデューサーの段差を縮小し、スムーズな挿入を実現しました。
- 各カニユーレサイズにフィットしたイントロデューサーには、マーカが付いています。
- イントロデューサーを抜去する際、先端側のマーカが見えたらクランプ可能です。
- 操作性を向上させるため、クランプ位置を十分確保しました。
- イントロデューサーのハンドル部分にはロッキングリングが付いており、血液の漏れを最小限に抑えます。

仕様

品番	DurafluoII 品番*	サイズ	有効長	コネクタ
VFEM018	DVFEM018	18Fr.(6.0mm)	55cm	3/8"
VFEM020	DVFEM020	20Fr.(6.7mm)	55cm	3/8"
VFEM022	DVFEM022	22Fr.(7.3mm)	55cm	3/8"
VFEM022L	—	22Fr.(7.3mm)	65cm	3/8"
VFEM024	DVFEM024	24Fr.(8.0mm)	68cm	3/8"
VFEM028	DVFEM028	28Fr.(9.3mm)	68cm	3/8"

※生体適合性付加

●DurafluoIIへバリンコーティングの製品は、「生物由来製品」です。

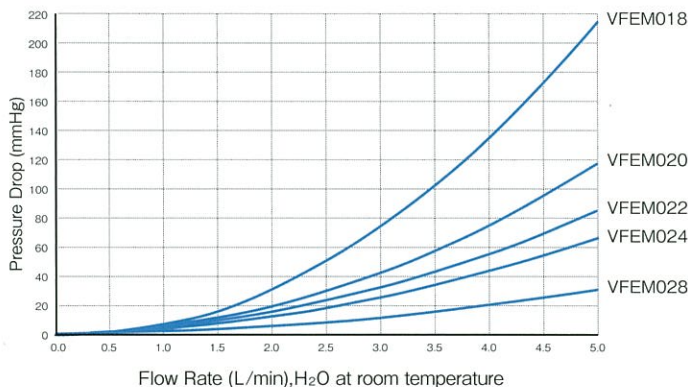

関連品

名称	品番	詳細
インサージョンキット(V)	PIKV	静脈用セット(VEN210、#11メス、18Gコードル、5ccシリンジ8Fr./12Fr./16Fr./ダイレーター)
ダイレーター	DIL012	12Fr×22.5cm、#11メス

販売名	承認番号	分類名
エドワーズ体外循環カニユーレNC	21500BZY00158	(4) 経皮的挿入用カニユーレ
エドワーズ体外循環カニユーレ	21300BZY00687	(4) 経皮的挿入用カニユーレ 生体適合性付加

本製品の使用は1回限りです。再使用・再滅菌はしないでください。

※記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

© 2009 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. EW2013069 1309_2_2000

製品に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

札幌 Tel.(011)261-6810(代) 仙台 Tel.(022)225-4743(代) 東京 Tel.(03)6859-0920(代)
 横浜 Tel.(045)232-7328(代) 名古屋 Tel.(052)735-7610(代) 大阪 Tel.(06)6350-6341(代)
 広島 Tel.(082)242-2425(代) 岡山 Tel.(086)226-2440(代) 福岡 Tel.(092)281-5414(代)

製造販売元 エドワーズライフサイエンス株式会社

本社：東京都新宿区西新宿6丁目10番1号

edwards.com/jp



Edwards