


Real Flexibility and Options

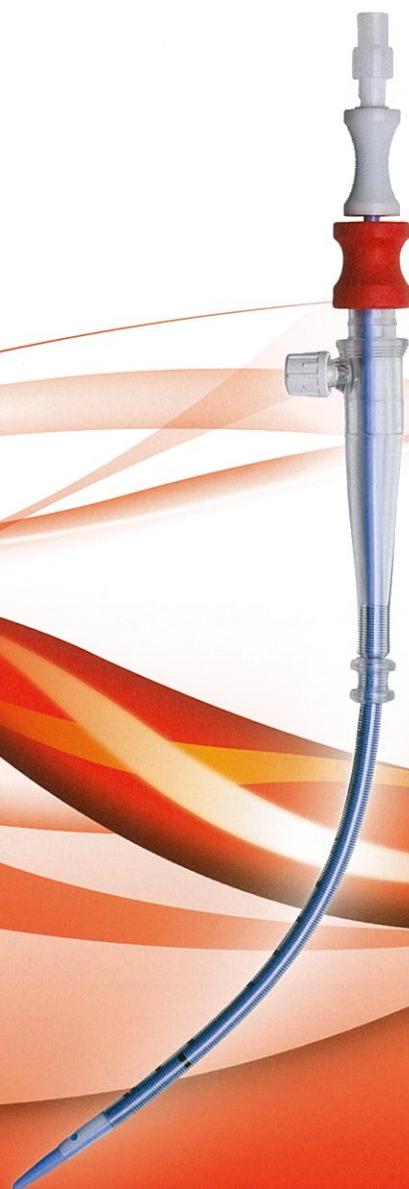


Edwards Protection Cannulae

OptiSite Arterial Cannulae

オブティサイト



Edwards

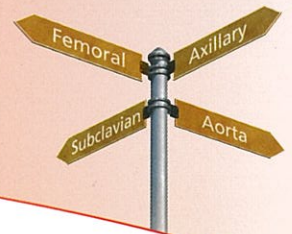

特徴

- ウルトラシンウォール技術により、優れた柔軟性を実現しました。
- 先端の丸いイントロデューサー^①が、各送血部位への安全な挿入をサポートします。
- イントロデューサーには、挿入時のズレを防止するロック機能を採用しています。
- ガイドワイヤーを使用しない場合も、ベントキャップ^②が逆流を防止し出血を最小限に抑えます。
- 深度マーカー^③により、送血位置が一目でわかります。
- 個別の状況に応じて、幅広い送血方法に対応することが可能です。
- 従来品の16Fr. 18Fr. 20Fr.に、22Fr.が新たに加わりました。

①



②




③



仕様

品番	サイズ	有効長	コネクタ
OPTI16	16Fr. (5.3mm)	15cm	3/8"Tベント付
OPTI18	18Fr. (6.0mm)	15cm	3/8"Tベント付
OPTI20	20Fr. (6.7mm)	15cm	3/8"Tベント付
OPTI22	22Fr. (7.3mm)	15cm	3/8"Tベント付

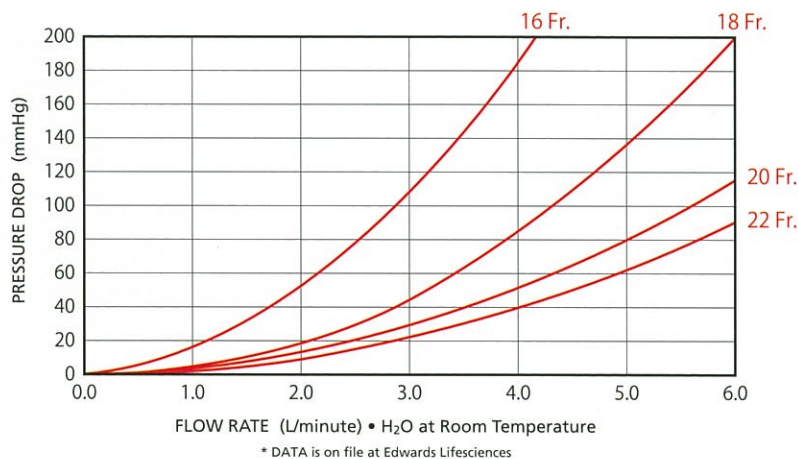

関連品

名称	品番	詳細
インサージョンキット	PIKA	動脈用セット (ART100、#11メス、18Gニードル、5ccシリンジ、8Fr./12Fr./16Fr.ダイレーター)
ガイドワイヤー (A)	ART100	0.038" × 100cm

販売名	承認番号	分類名
オプティサイト	22400BZX00357	(4) 経皮的挿入用カニューレ

▶ 本製品の使用は1回限りです。再使用・再滅菌はしないでください。

※記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

© 2012 Edwards Lifesciences Limited. All rights reserved. EW2012055 1210_0_1500

製品に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

札幌 Tel.(011)261-6810(代) 仙台 Tel.(022)225-4743(代) 東京 Tel.(03)5213-5710(代) 横浜 Tel.(045)232-7328(代)
 大宮 Tel.(048)647-5311(代) 名古屋 Tel.(052)735-7610(代) 大阪 Tel.(06)6350-6341(代) 広島 Tel.(082)242-2425(代)
 岡山 Tel.(086)226-2440(代) 福岡 Tel.(092)281-5414(代)

製造販売元 エドワーズライフサイエンス株式会社
 本社：東京都新宿区西新宿6丁目10番1号
edwards.com/jp

2013年8月26日より
 東京/大宮支店へのご連絡は、(03)6859-0920(代)にお願い致します。



Edwards