

Proven Bovine
Pericardial Tissue



ウシ心のう膜パッチ

牛心のう膜はコラーゲンの含有率が高く、
分布が網状で分散されているため、耐久性があります。
また、本製品は独自の処理法により、柔軟性を兼ね備えています。



Edwards

ウシ心のう膜パッチ

特長

- カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体弁でも実証されているXenologiX処理により耐久性があり、石灰化抑制効果が期待されています。
- コラーゲンの自然波形構造に変化を与えないNeutralogic Fixationにより柔軟性を兼ね備えています。
- 10cm×15cmのサイズのため様々な使用用途に対応できます。

適応症例

- 心房中隔欠損症
- 心室中隔欠損症
- 右室流出路形成術
- 僧帽弁輪形成術

仕様

サイズ


A : 10±0.5 cm

B : 15±0.5 cm

厚さ : 0.25~0.77 mm

保存液

グルタルアルデヒド溶液

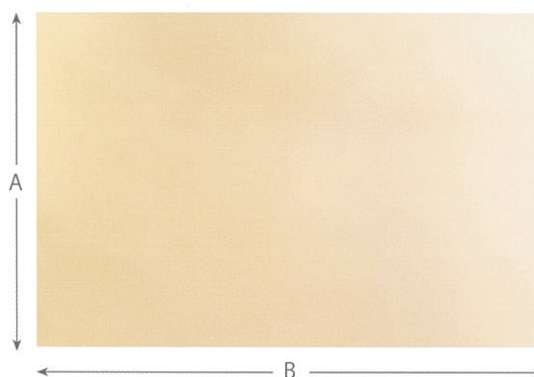

販売名 ウシ心のう膜パッチ

品番 4700

承認番号 22200BZX00841

注意

- 一般の冷蔵庫では保管せず、10～25℃の範囲内に温度管理されている部屋等で保管してください。
(庫内温度を上記範囲内に維持できる恒温器等での保管は問題ありません)
- 直射日光や高温にさらされる場所では保管しないでください。
- 受け取り時、使用時、返却時には温度インジケーターが反応していないことを確認してください。

※記載事項は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

© 2010 Edwards Lifesciences Limited. All rights reserved. EW-2010-064 1102_2_2000

製品に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

札幌 Tel.(011)261-6810(代) 仙台 Tel.(022)225-4743(代) 東京 Tel.(03)5213-5710(代) 横浜 Tel.(045)232-7328(代)
大宮 Tel.(048)647-5311(代) 名古屋 Tel.(052)735-7610(代) 大阪 Tel.(06)6350-6341(代) 広島 Tel.(082)242-2425(代)
岡山 Tel.(086)226-2440(代) 福岡 Tel.(092)281-5414(代)

製造販売元 エドワーズ ライフサイエンス株式会社
本社：東京都新宿区西新宿6丁目10番1号
edwards.com/jp

2013年8月26日より
東京/大宮支店へのご連絡は、(03)6859-0920(代)にお願い致します。



Edwards